

Zolar Photon

Technologia Zolar

www.zolartek.com

Komentarze konsultantów

- “Uwielbiam bezprzewodową funkcję pedału nożnego.”
- “Stosunkowo mała, przenośna jednostka.”
- “Praktyczne menu oparte na procedurach.”
- “Ekran dotykowy wymaga silnego nacisku.”
- “Pomocna byłaby szpula zwijająca przewód prostnicy.”

Opis

Zolar Photon to przenośny laser diodowy, który działa na długości fali 810 nm i mocy 3 watów. Zalecany do modyfikacji tkanek miękkich i profilaktyki. Urządzenie posiada bezprzewodowy pedał nożny i akumulator litowy, który zapewnia od 3,5 do 4 godzin użytkowania. Laser **Zolar Photon** wyposażony jest w autoklawowalny uchwyt, jednorazowe i zginane końcówki, monitor z ekranem dotykowym, 21 wstępnie ustawionych opcji chronionych hasłem, tryb ciągły lub impulsowy oraz wbudowaną technologię nawigacji z wbudowanymi samouczkami. Urządzenie wykorzystuje jednorazowe, giętke końcówki. Każda jednostka zawiera przykładowy zestaw końcówek, okulary ochronne, ładowarkę i instrukcję wraz z futerałem. Dostępna jest również wersja 10-watowa z możliwością wybielania zębów. **Zolar Photon** był oceniany przez ośmiu konsultantów przez okres trzech miesięcy. Ten laser do tkanek miękkich otrzymał 96% w ocenie klinicznej.

Funkcje sprzętu

Konsultanci wykorzystywali **Zolar Photon** do różnych procedur na tkankach miękkich. Wstępnie ustawione parametry oparte na procedurach klinicznych sprawiają, że urządzenie jest bardzo łatwe w konfiguracji i obsłudze. Użytkownicy mogą szybko zmienić te ustawienia zgodnie z potrzebą podczas trwania procedury. Najczęściej używane przyciski zwiększają moc lub przełączają między trybem pulsacyjnym i ciągłym. Menu ekranowe jest nieco skomplikowane, gdy istnieje potrzeba zapisania edytowanych wstępnych ustawień. Akumulator i bezprzewodowy pedał zwiększają mobilność urządzenia. Jednorazowe końcówki eliminują potrzebę dużej szpuli włókna niezbędnej w niektórych urządzeniach. Końcówki jednorazowego użytku zawierają długie włókno szklane; niektórzy konsultanci skrócili je w celu poprawy ergonomii. Ogółem Zolar Photon wykonuje procedury na tkankach miękkich sprawnie i skutecznie.


Odsetek konsultantów którzy:




Procent konsultantów, którzy uważają Zolar Photon za:



Funkcje:

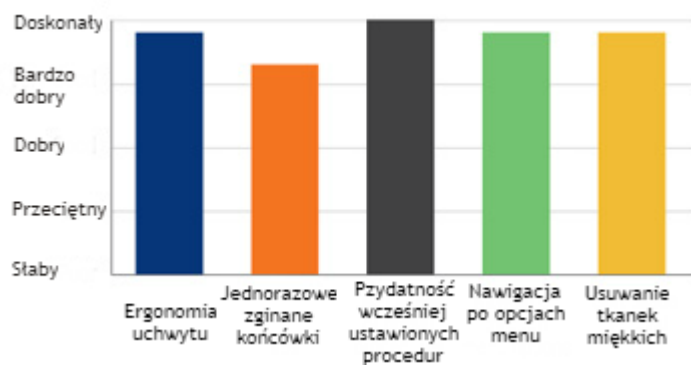

Procedury:

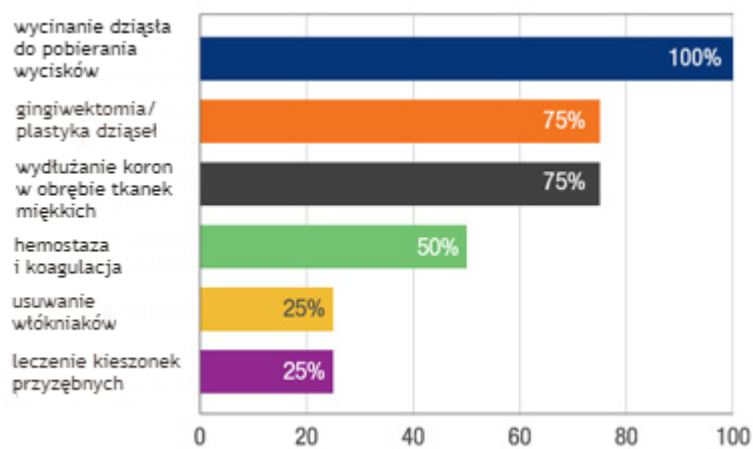

<https://www.dentaladvisor.com/evaluations/zolar-photon/>